


# HSE COVID-19 MĀJAS ANTIGĒNU TESTI

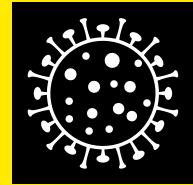

Coronavirus  
**COVID-19**  
Public Health  
Advice

HSE sniedz Jums mājas antigēnu testus COVID-19 noteikšanai.

Lai iegūtu informāciju par antigēnu testu veikšanu, apmeklējiet vietni HSE.ie.

**Varat arī zvanīt uz COVID-19 atbalsta tālruni 1800 700 700**

## **Kā veikt HSE mājas antigēnu testus**

Kastītē ir instrukciju buklets, kurā būs informācija par to, kā droši uzglabāt, lietot un izmest mājas antigēnu testus. Mūsu tīmekļa vietnē varat arī noskatīties video par to, kā veikt mājas antigēnu testu – lūdzu, apmeklējiet vietni HSE.ie vai skenējiet zemāk norādīto QR kodu.




Šie ir vispārīgi soļi, kas būtu jāievēro, veicot antigēnu testu:

1. Nomazgājiet vai dezinficējiet rokas.
2. Novietojiet visus testu komplektā esošos priekšmetus uz tīras virsmas.
3. Atveriet pildīto mēģeni un ievietojiet to turētājā.
4. Atveriet uztriepes kociņa iesaiņojumu – pieskarieties kociņam tikai pie tā kāta, neaiztieciat mīksto galu.
5. Ievietojiet kociņu kreisajā deguna nāsī, līdz jūtat pretestību. Parasti tie ir aptuveni 2 – 4 cm.
6. Ritiniet kociņu nāsī 5 reizes.
7. Izmantojot šo pašu kociņu, atkārtojiet šo procesu labajā nāsī.
8. Ievietojiet kociņu mēģenē, līdz mīkstais spilventiņš atrastos šķidrumā.
9. Apmēram 1 minūti maisiet kociņu, lai pārlicinātos, ka testa šķidrums ir iespēja uzsūkt uz kociņa esošo uztriepes paraugu.
10. Saspiediet mēģeni ar abiem pirkstiem un uzmanīgi izvelciet kociņu no mēģenes.
11. Uzlieciet mēģenei vienu no mazajiem plastmasas vāciņiem, kas iekļauti komplektā.
12. Iepilniet 4 pilienus šķidruma testa ierīcē.
13. Uzgaidiet instrukcijā norādīto laiku - parasti 15 minūtes.
14. Rezultāts tiks uzrādīts testa ierīcē.

Kad esat pabeidzis antigēnu testa veikšanu, ievietojiet to plastmasas maisiņā un izmetiet savā atkritumu tvertnē.



Rialtas na hÉireann  
Government of Ireland

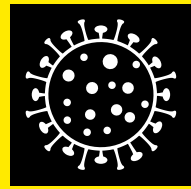

### **Ja kāds no Jūsu HSE mājas antigēnu testiem ir pozitīvs**

Lūdzu, apmeklējiet vietni [HSE.ie](https://www.hse.ie), lai uzzinātu, kas Jums jā dara, ja Jūsu antigēnu tests ir pozitīvs. Par sava antigēnu testa rezultātu Jūs varat ziņot arī, apmeklējot vietni [www.hse.ie/reportantigenresult](https://www.hse.ie/reportantigenresult) vai skenējot zemāk norādīto QR kodu.



### **Atšķirība starp COVID-19 testēšanu mājās un HSE testu centrā**

#### **Antigēnu testi veikšanai mājās:**

Šos testus, kas Jums jā veic mājās, sauc par mājas antigēnu testiem. Šos testus varat veikt pats, ievērojot norādījumus, kas pievienoti kastītē. Tests uzrādīs rezultātu pēc 15 minūtēm, taču tas ir mazāk precīzs nekā PQR tests.

#### **PQR testi HSE COVID-19 testu centrā:**

HSE COVID-19 testēšanas centros tiek izmantoti PQR testi. Jūsu paraugu ņems apmācīts personāls, un rezultāti būs pieejami pēc 24–48 stundām, jo paraugs tiek analizēts laboratorijā. Šis tests ir precīzāks nekā antigēnu tests.

#### **Antigēnu testu efektivitātes robežas:**

Antigēnu testi ir mazāk precīzi nekā PQR testi. Dažos gadījumos tie var neatklāt vīrusu. Tāpēc Jums ir jā veic vairāki testi noteiktā laika periodā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.hse.ie](https://www.hse.ie).

Ja Jums ir jautājumi par mājas antigēnu testiem, zvaniet uz COVID-19 atbalsta tālruni 1800 700 700.

### **Svarīga informācija – lūdzu, izlasiet!**

1. Saņemtie testi jā veic saskaņā ar Veselības dienesta (HSE) ieteikumiem un ražotāja norādījumiem un lietošanas instrukcijām. Bērniem līdz 13 gadiem testējamais paraugs jānoņem ar vecāku palīdzību. Testi nav ieteicami bērniem līdz 4 gadu vecumam.
2. HSE neapliecina un negarantē, ka pievienotie testi ir vai būs efektīvi vai dos kādu konkrētu rezultātu vai iznākumu.
3. HSE vai jebkurai citai saistītai personai nerodas nekāda atbildība (tieša, aizstājoša, izrietoša, iespējama, īpaša vai nejauša; neatkarīgi no tā, vai tā ir līguma, delikta vai cita veida lieta) attiecībā uz testu lietošanu vai uzglabāšanu. Uz šo juridisko atrunu attiecas Īrijas likumi, un uz jebkuru strīdu ekskluzīvā jurisdikcija pieder Īrijas tiesām.